

12H SYSTEM

DIE EFFIZIENTE LÖSUNG
FÜR DEN TAGESBETRIEB

MED (TRON[®]) AG



12H MEHRFACH VERWENDBARES
VERBRAUCHSMATERIAL FÜR DIE RADIOLOGIE

12H SYSTEM

12H MEHRFACH VERWENDBARES VERBRAUCHSMATERIAL FÜR CT UND MR

Unser Verbrauchsmaterial für die Mehrfachverwendung bis zu 12 Stunden ist für den Einsatz innerhalb eines Arbeitstages validiert.

In diesem Zeitraum können mehrere Patienten untersucht werden – lediglich der Patientenschlauch wird nach jedem Patienten gewechselt.

Das abgestimmte System ermöglicht eine einfache Handhabung und einen effizienten Workflow. Weniger Systemwechsel sparen Zeit und reduzieren den Materialverbrauch.

Ideal für Radiologien, ambulante Diagnosezentren und Einrichtungen mit Betriebszeiten bis zu 12 Stunden.

12H SYSTEM

DIE EFFIZIENTE LÖSUNG FÜR DEN TAGESBETRIEB

EIN SYSTEM DAS ÜBERZEUGT

DIE KOMPONENTEN IM ÜBERBLICK

Das 12h System besteht aus einem Verbrauchsmaterial-Set für CT und 2 Sets für MR sowie drei Patientenschläuchen (Single Use).

Während die Sets bis zu 12h verwendet werden können, wird der Patientenschlauch nach jedem Patienten gewechselt.

SETS



CT Set 12h 200+200

Art. 317648-100

2x 12h Spritze 200
1x 12 h Schlauchsystem D
(inkl. Standard Spikes)



MR Set 12h 200+65

Art. 317650-100

1x 12h Spritze 200
1x 12h Spritze 65
1x 12h Schlauchsystem RS
1x Standard Spike
1x Mini Spike



MR Set 12h 65+65

Art. 317652-100

2x 12h Spritze 65
1x 12h Schlauchsystem RS
1x Standard Spike
1x Mini Spike

PATIENTENSCHLÄUCHE



Patientenschlauch MM 150

Art. 318400-100




Patientenschlauch MM SP 150

Art. 318401-100



Patientenschlauch MM SP 250

Art. 318411-100

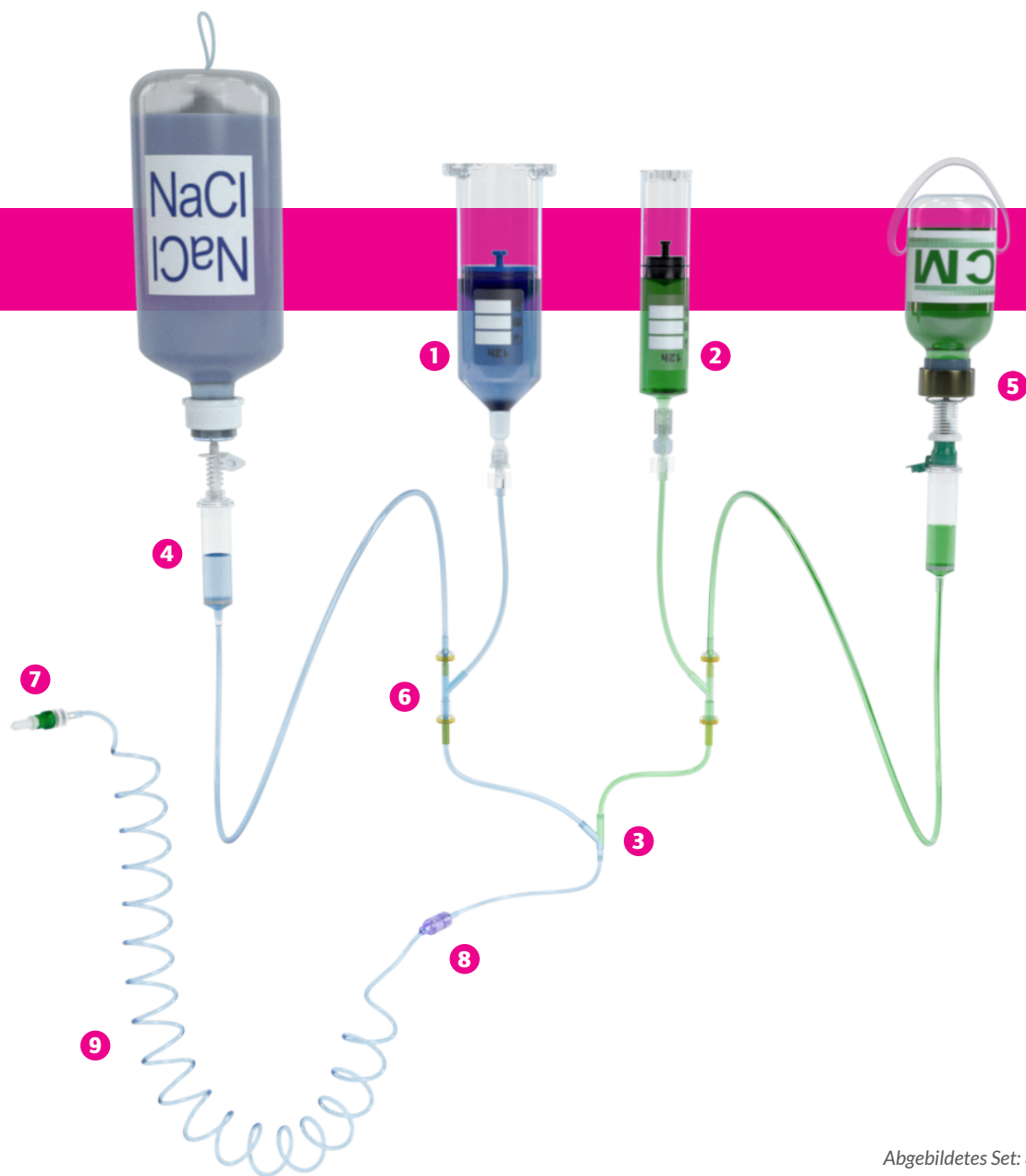

Abgebildetes Set: 317650-100

- 1 12h Spritze 200 ml**
 zertifiziert, um eine luftgetragene Kontamination für die Dauer von 12 Stunden zu verhindern
- 2 12h Spritze 65 ml**
 zertifiziert, um eine luftgetragene Kontamination für die Dauer von 12 Stunden zu verhindern
- 3 12h Füllschlauch D**
 schützt Spritzen und Vorratsbehälter vor retrograder Kontamination und ermöglicht mehrfaches Nachfüllen und Injizieren innerhalb von 12 Stunden
- 4 Tropfkammern**
 intelligent konstruierte Inline-Tropfkammern mit Filtern verhindern, dass kristallisierte Partikel von Kontrastmittel oder anderem in Spritzen oder Schlauchsystem gelangen
- 5 Austauschbare Spikes**
 für jeden Vorratsbehälter, reduzieren das Kontaminationsrisiko
- 6 Präzise konstruierte Y-Konnektoren**
 reduzieren Verwirbelungen und Luftblasen
- 7 Sichere Ventile**
 an Patientenschlauch. Zertifiziert, um retrograde Kontamination für die Dauer von 12 Stunden zu verhindern
- 8 Drop-Stop abwischbarer Anschluss**
 verhindert das Nachtropfen von Flüssigkeit beim Trennen der Verbindung, vermeidet den Kontakt der sterilen Flüssigkeit mit Luft und kann mit einem sterilen Alkoholtupfer desinfiziert werden
- 9 Patientenschlauch**
 in zwei Längen erhältlich (150 und 250 cm)

DIE VORTEILE

IM ÜBERBLICK

Klinischer Nutzen



- Sicherer Schutz vor retrograder Kontamination für 12h
- Desinfektionsbeständige Konnektoren

Operativer Nutzen



- Effiziente Multi-Patient-Anwendung innerhalb eines Arbeitstages (bis 12h)
- Dropstop-Anschluss verhindert Nachtropfen
- Einfache und intuitive Handhabung
- Klare Farbkennzeichnung zur einfachen Unterscheidung

Finanzieller Nutzen



- Kosteneffiziente Systemlösung
- Reduzierte Abfallmenge durch effiziente Mehrfachverwendung



IHR KONTAKT



Team DACH:

Deutschland, Österreich, Schweiz
Tel.: +49 (0)681-97017-72
Fax: +49 (0)681-97017-60
E-Mail: sales.dach@medtron.com

Team International 1:

*West-Europa, Lateinamerika,
Subsahara-Afrika & Asien-Pazifik*
Tel.: +49 (0)681-97017-26
Fax: +49 (0)681-97017-20
E-Mail: sales.int1@medtron.com

Team International 2:

*Ost-Europa, Gemeinschaft Unabhängiger Staaten,
Nahe Osten, Nordafrika & Türkei*
Tel.: +49 (0)681-97017-63
Fax: +49 (0)681-97017-20
E-Mail: sales.int2@medtron.com

Service Team Verbrauchsmaterialien:

Tel: +49 (0) 681-97017-48
E-Mail: rdnamd@medtron.com

12H SYSTEM

DIE EFFIZIENTE LÖSUNG FÜR DEN TAGESBETRIEB

MEDTRON AG | Hauptstraße 255 | 66128 Saarbrücken, Deutschland
Tel: +49 (0)681-97017-0 | Fax: +49 (0)681-97017-20 | info@medtron.com

Besuchen Sie uns unter www.medtron.com