

Der Accutron® CT ist als Einzelkolben-Injektor das ideale Einstiegsmodell aus unserer Accutron®-Injektorenreihe. Er ist einfach und schnell zu bedienen und verfügt dennoch über dieselbe ausgereifte Technologie wie alle Accutron®-Injektoren. Wenn Sie erste Erfahrungen mit dem Einsatz eines Kontrastmittelinjektors in der Computertomographie machen möchten, ist der Accutron® CT genau der Richtige für Sie.

KLINISCHER NUTZEN


- Hygiene: Alle Accutron®-Injektoren sind konstruktionsbedingt leicht zu reinigen, da sie keine versteckten Kontaminationsherde, wie unzugängliche Zwischen- oder Innenräume aufweisen. Das Kontaminationsrisiko wird minimiert.
- Kontrolle: Echtzeit-Drucküberwachung
- Komfort: Speichern Sie bis zu 80 Injektionsprofile in der integrierten Datenbank und rufen Sie diese bei Bedarf auf.

OPERATIVER NUTZEN

- Kontrolle: Die Darstellung der Injektionsparameter auf dem Display ermöglicht die zuverlässige Überwachung der Injektion. Die Injektion kann im Verlauf der Untersuchung jederzeit unterbrochen und fortgesetzt werden.
- Flexibilität: Der Accutron® CT kann neben unseren ELS 200ml auch mit vorgefüllten Spritzen bestückt werden.
- Ausdauer: Der Accutron® CT ist für den permanenten Betrieb am Stromnetz ausgelegt.
- Mobilität: Mit einem Gesamtgewicht 15kg lässt der Accutron® CT sich mühelos zum jeweiligen Untersuchungsraum bewegen.

FINANZIELLER NUTZEN

- Der Accutron® CT ist erschwinglich in der Anschaffung und sparsam im Unterhalt, er schont Ihr Budget somit in doppelter Hinsicht.
- Dank seiner effizienten Bestückung mit vorgefüllten Spritzen und des daraus resultierenden hohen Durchsatzes arbeitet der Accutron® CT besonders wirtschaftlich.

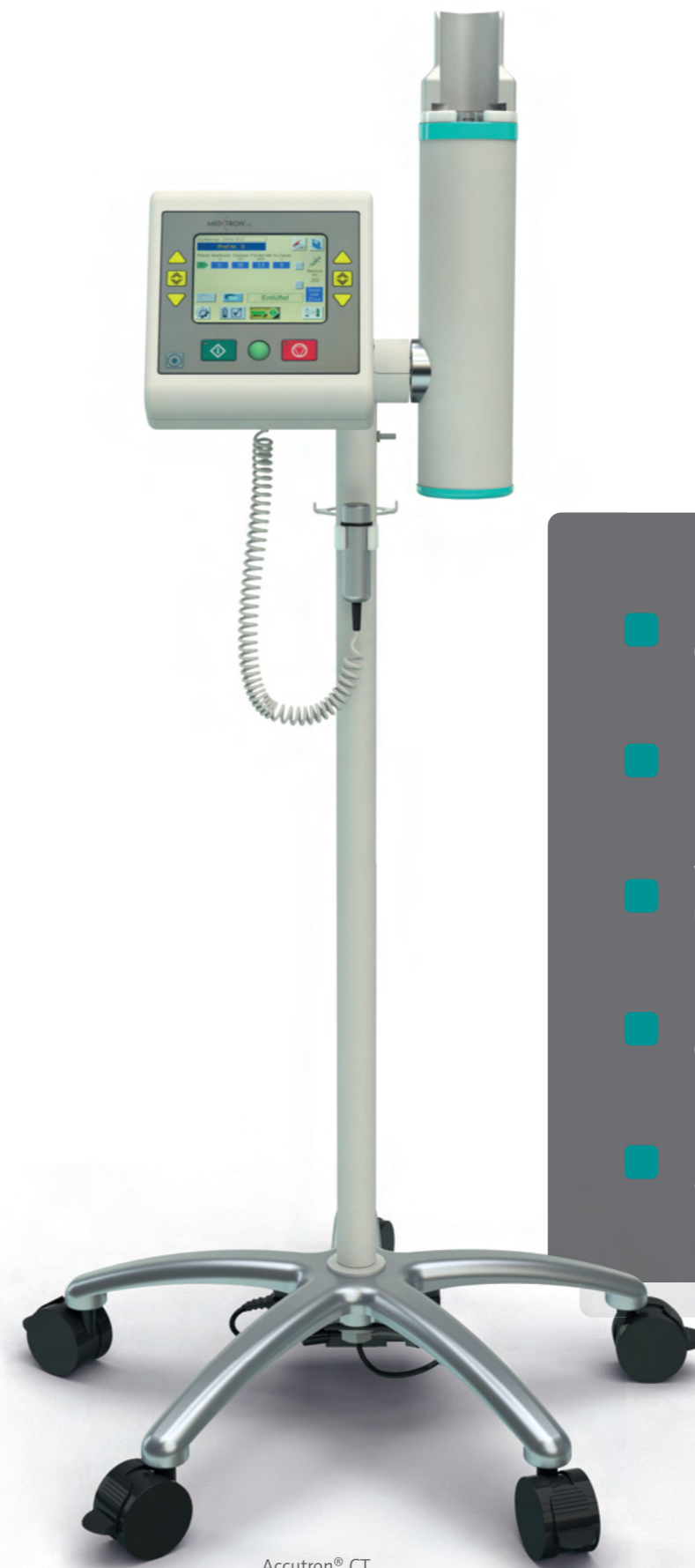

Accutron® CT
Artikelnummer CT871

- **Müheleses Einsetzen und Entnehmen der Easy Loading Syringes (ELS)**
- **Konstante Temperatur der Injektionsflüssigkeiten**
- **Visuelle Kontrolle über Injektionsparameter**
- **Injektionssteuerung über Handtaster direkt am Patienten**
- **Permanenter Betrieb am Stromnetz**

PRODUKTAUSWAHL

ARTIKEL-BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
MODELLE		
Accutron® CT Power Supply Version	mobiler Injektor auf Rollen mit Netzstromversorgung	CT871

AUSSTATTUNG (INKLUSIVE)

Handtaster mit Spiralkabel	zum Starten und Stoppen der Injektion
Netzteil	mit länderspezifischem Stecker
Becher- und Flaschenhalter	Halterung am Injektor inkl. Becher

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fernbedienung	Touchscreen, mit Bluetooth-Verbindung, inkl. Netzteil, Transmitter und Antenne	FB875S
Infusionständer	mit Becherhalter und Becher	490200
Option vorgefüllte Spritzen	ermöglicht die Nutzung von vorgefüllten Spritzen (z.B. Optiject) inkl. ELS-Adapter	490110

TECHNISCHE DATEN

INJEKTIONSVOLUMEN
max. 200 ml

PHASEN
1 bis 6 Phasen

INJEKTIONSDRUCK
max. 21 bar,
5-21 bar, programmierbar
in 1 bar-Taktung

FÖRDERRATE
0,1 - 10 ml/s,
programmierbar in
0,1 ml/s-Taktung, wahl-
weise Eingabe von Förder-
rate oder Phasendauer

**WÄHLBARES
TEILVOLUMEN**
1 - 200 ml,
programmierbar in
1 ml-Taktung

INJEKTIONSPROFILE
80 Profile,
individuell programmier-
& speicherbar

**INJEKTIONS-, PHASEN-
& SCANVERZÖGERUNG**
0 - 255 s

FÜLLGESCHWINDIGKEIT
1 - 5 ml/s,
programmierbar
in 1 ml/s-Taktung

Technische Änderungen vorbehalten.

